

## VERSTÄRKTER OPERATIONSKITTEL - STERIL

### DEUTSCH

**Produktname** Verstärkter SMMS Einweg-Kittel (Steril)

**Produktcode** FGS-RF-SM50-M, FGS-RF-SM50-L, FGS-RF-SM50-XL, FGS-RF-SM50-XXL

**Produktgröße** Maßeinheit: cm

GIMA-CODE	21040	21041	21042	21043
FULL GUARD-CODE	FGNS-SG-SM40-M	FGNS-SG-SM40-L	FGNS-SG-SM40-XL	FGNS-SG-SM40-XXL
Größen	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Länge (Von der Schulter bis zum Saum )	120	120	130	140
Breite (Monolage)	140	150	150	160
Gürtellänge	65	65	65	69
Ärmellänge	58	59	59	61
Abweichung	±2	±2	±2	±2

**Produktmodell** Kitteltyp. M/L/XL/XXL

**Textur und Zusammensetzung** Das Produkt verwendet 50g SMMS Vliesstoff. Es besteht aus einer Vorderseite, Rückseite, Ärmel, Band und Bündchen. Die Verarbeitungstechnik beinhaltet Schneiden, Ultraschallschweißen, Bänder, Trikot, Bündchen, Falten, Verschweißen.

**Bestimmungsgemäße Verwendung** Das Produkt wird hauptsächlich für die allgemeine Isolierung in Ambulanzen, Kliniken, Untersuchungsräumen, Reinigungsräumen, Laboren usw. verwendet. Es ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Kliniken bestimmt, um ein gutes Hygieneniveau aufrechtzuerhalten und zur Kontrolle des Infektionsrisikos beizutragen.

**Gegenanzeigen** Die Produkte können nur einmal und sollten sofort nach dem Öffnen der Verpackung verwendet werden.

Die Verpackung ist beschädigt ist oder das Produkt ist feucht oder verschimmelt. Das Produkt darf in diesem Fall nicht verwendet werden.

**Verwendung** Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie den Produkt heraus. Schütteln Sie den Kittel leicht, heben Sie die Seiten des Kragens an, fahren Sie mit den Händen in die Ärmel, strecken Sie die Arme nach vorne und binden Sie die Bänder zu.

**Lagerung** Sie sollte in einem sauberen Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80 %, ohne korrosive Gase, an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden.

### ⚠️ Warnung

- Das Produkt ist ein Einwegprodukt, verwenden Sie es nicht wieder.
- Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, teilen Sie es niemals mit jemand anderem.
- Es ist verboten, das Produkt zu gebrauchen, wenn die Verpackung oder das Produkt beschädigt sind.

**Hinweis Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Anwender oder Patient ansässig ist.**










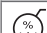




**Gültigkeit** 3 Jahre.

**Produktionsdatum** Siehe Datum auf der Verpackung


**Ablaufdatum** Siehe Datum auf der Verpackung

### GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

 Erzeugniscode	 Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern	 An einem kühlen und trockenen Ort lagern
 Chargennummer	 Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/CEE	 Ablaufdatum
 Hersteller	 Herstellungsdatum	 Sterilisiert mit Ethylenoxid
 Feuchtigkeitsgrenzwert	 Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist	 Autorisierter Vertreter in der EG
 Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden	 Gebrauchsanweisung beachten	

**REF** FGS-RF-SM50-M (GIMA 21052)  
FGS-RF-SM50-L (GIMA 21053)  
FGS-RF-SM50-XL (GIMA 21054)  
FGS-RF-SM50-XXL (GIMA 21055)

 Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd  
Yongan East Avenue,  
Xianning Economic Development  
Zone, Xianning City, Hubei Province, China  
Made in China

 ZOUSTECH S.L.  
Pso. Castellana, 141 - Planta 19,  
28046 - Madrid, Spain

Eingeführt von / Importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

**STERILE EO**

