



Activity Health Trackers - Activity Health Trackers - Bracelet Suiveur d'activité - Monitor de actividad
Monitor de activitate - Παρακολούθηση δραστηριότητας - Aktivitätsmonitor - Monitor de atividades


English 	P 01
Deutsch 	P 09
Français 	P 16
Ελληνικά 	P 25
Italiano 	P 33
Español 	P 41
Português 	P 48
Română 	P 56

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că puterea este suficientă înainte de pornire.
Utilizați portul de încărcare USB pentru alimentare.



Îndepărtați mai întâi banda
pentru încheietură
Scoateți cadrul

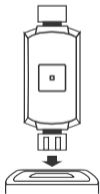


Conectați-l la capul de
încărcare USB pentru
alimentare

Prima dată, scoateți brățara și alimentați dispozitivul folosind încărcătorul corespunzător. În timpul alimentării, brățara va porni automat (modul de încărcare este prezentat în figura de mai jos: Îndepărtați cadrul brățării și conectați portul de încărcare la portul USB standard pentru alimentare.)

MOD DE UTILIZARE

1. Cel mai bine este să purtați brățara în spatele maleolei ulnare;
2. Reglați dimensiunea potrivită, strângând gaura de ajustare pentru a se potrivi încheieturii; Fixați butoanele curelei de încheietură;
3. Senzorul trebuie să fie aproape de piele, evitând să vă mișcați.

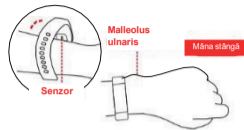

ALIMENTARE PORNITĂ/OPRITĂ

1. În starea de oprire a brățării, tasta funcțională cu atingere lungă de peste 3 secunde poate face dispozitivul să vibreze.
2. Când brățara se află în starea BOOT, va comuta la interfața de închidere. Dacă tasta funcțională tactilă durează mai mult de 3 secunde, poate comuta în interfața de oprire. După ce atingerea scurtă este selectată pe OFF (oprit), se va opri din nou.

FUNCȚIONARE

1. Când dispozitivul pornește, atingerea tastelor funcționale pentru o perioadă scurtă de timp poate lumina ecranul sau poate comuta afișajul;
2. Ecranul se va opri în lipsa funcționării, iar utilizatorii pot conecta aplicația pentru telefonul mobil pentru a revizui timpul de oprire al ecranului;
3. Treceți la interfețele ritmului cardiac și a tensiunii arteriale pentru a fi testate automat și ieșiți pentru a opri testele.

INSTALAȚI APLICAȚIA PENTRU BRĂȚARĂ

Scanați următoarele coduri QR sau intrați pe diverse piețe mari de aplicații pentru a descărca și instala „DayBand”.



Google Play



iOS

Cerințe pentru dispozitiv: iOS8.0 și peste; Android 4.4 și versiuni ulterioare pentru acceptarea versiunii de bluetooth 4.0

CONECTAREA DISPOZITIVULUI

Când este utilizat pentru prima dată, este necesar să conectați aplicația pentru împerechere. După o conexiune reușită, brățara se va autosincroniza sau, în caz contrar, calculul pașilor și informațiile cu privire la somn nu vor fi exacte.

Deschideți aplicația pentru telefonul mobil
Faceți clic pentru a configura pictogramele

↓
Dispozitivul meu (iOS)/căutare
echipament (Android)

↓
Glisați în jos echipamentul de scanare

↓
Faceți clic pe conectare dispozitiv



Conectare Bluetooth: după potrivirea cu succes, aplicația va salva automat adresa bluetooth a brățării. Când aplicația este deschisă sau funcționează în fundal, va efectua căutarea în mod automat și se va conecta cu brățara.

Sincronizarea datelor: glisați manual în jos datele de sincronizare de pe pagina de pomire a aplicației; brățara poate stoca date off-line timp de 7 zile. Cu cât mai multe date există, cu atât timpul de sincronizare este mai lung, iar cel mai lung timp este de aproximativ 2 minute.


FUNCȚII ȘI SETĂRI APLICAȚIE

Informații personale și obiective ale exercițiilor

După ce intrați în aplicație, vă rugăm să configurați mai întâi informațiile personale.
Setări → Setări personale



Portretul capului, sexul, vârsta, înălțimea și greutatea pot fi configurate, iar informațiile personale pot îmbunătăți acuratețea informațiilor.

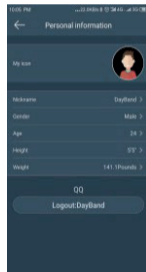Personalizați-vă obiectivele personale de exerciții zilnice. Un plan rezonabil de exerciții este util pentru promovarea calității corpului.



INTERFAȚĂ FUNCȚIONALĂ PRINCIPALĂ

Interfață principală

Când pictograma Bluetooth este , înseamnă că brățara nu este conectată la telefonul mobil. Când pictograma Bluetooth este , înseamnă că conexiunea s-a efectuat cu succes. Când brățara și aplicația sunt conectate pentru prima dată, brățara va sincroniza vremea, ora, data și săptămâna din telefonul mobil.

Apăsați lung 3 secunde pentru a comuta interfața principală

Monitorizarea temperaturii

În interfața de monitorizare a temperaturii. Pe durata măsurării, vă rugăm să așteptați câteva zeci de secunde pentru ca informațiile să apară.

Când vă măsurați temperatura, purtați brățara mai mult de 1 minut pentru precizie

Informații legate de mișcare

Afișează numărul de pași, modul implicit de numărare a pașilor, atât timp cât brățara este purtată la încheietura mâinii. Când utilizatorul merge și își balansează brațele, brățara înregistrează în funcție de numărul de pași.

Monitorizarea ritmului cardiac

În interfața de monitorizare a ritmului cardiac, pe durata măsurării, vă rugăm să așteptați câteva zeci de secunde pentru ca informațiile să apară

Monitorizarea tensiunii arteriale

În interfața de monitorizare a tensiunii arteriale. Pe durata măsurării, vă rugăm să așteptați câteva zeci de secunde pentru ca informațiile să apară

Monitorizarea oxigenului din sânge

În interfața de monitorizare a oxigenului din sânge, pe durata măsurării, vă rugăm să așteptați câteva zeci de secunde pentru ca informațiile să apară

- În timpul testării, pictograma va pulsa și luminile LED ale soneriei de mână din spate se vor aprinde;
- În timpul testării, senzorul trebuie să se lipească de piele pentru a evita influența luminii externe asupra acurateții testului;
- Pentru a menține zona de testare curată, este necesar să se evite transpirația sau stropii, întrucât acestea vor afecta rezultatele testului.

Tipuri de mișcare

În interfața de mișcare, apăsați lung timp de trei secunde pentru a intra în interfața de mișcare specifică ce include un număr de mișcări. Faceți clic pentru modificare. În interfața de mișcare, țineți apăsat butonul timp de trei secunde pentru a începe mișcarea, țineți apăsat butonul timp de trei secunde pentru pauză și apăsați pentru a schimba modul de mișcare.

Interfață informații

În interfața de mesaje, apăsați lung trei secunde pentru a vizualiza mesajul, faceți clic pe page flip, vizualizați mesajul pentru a ieși sau apăsați lung trei secunde pentru a ieși.

Interfață mai multe funcții

În interfața cu mai multe funcții: apăsați lung trei secunde pentru a intra în interfața de meniu inferioară pentru mai multe funcții.

Interfață găsire telefon

Când sunteți conectați, faceți clic pe opțiunea „Găsire telefon” și telefonul va trimite un memento cu vibrații sau un memento cu ton de apel.

Interfață restabilire setări

Interfața este restabilită timp de trei secunde, iar brățara revine la setările din fabrică.

Despre interfața brățării

Pe interfața brățării sunt afișate cele patru cifre și numărul versiunii adresei Bluetooth.

Interfață de oprire

În interfața de Oprire, apăsați lung mai mult de trei secunde pentru a scutura telefonul.

FUNCȚIA DE PROMOVARE

Pentru funcția de promovare, un comutator de promovare va fi pornit în Centrul de setare APP-end, telefonul mobil și brățara vor fi păstrate pentru a fi conectate cu succes și vor exista memento-uri cu vibrații atunci când există mesaje.



Reamintire apel: atunci când apelantul sună, soneria va tremura și va fi afișat numele sau numărul apelantului. (dacă numele apelantului a fost salvat în agenda telefonului, acesta va fi afișat; în caz contrar, va fi afișat numărul apelantului)

Memento SMS: când intră un mesaj text, brățara va vibra și va afișa pictograma SMS de reamintire, mesajul cu adresa persoanei de contact din agendă și, de asemenea, numele și numărul apelantului.

Ceas cu alarmă inteligent: pot fi configurate trei ceasuri cu alarmă, iar acestea se vor sincroniza cu brățara după configurare. Ceasul cu alarmă inteligent este un ceas cu alarmă silențios. Când alarma este activată, brățara va provoca vibrații moderate și va suporta memento-ul offline al ceasului cu alarmă.

PARAMETRU

Rigliă ecran	0,96 inch	Bluetooth	Bluetooth 4.0
Tip baterie	Litiu-Polimer	rezistent la apă	Ip67 rezistent la apă
Timp de încărcare	1,5-2 ore	capacitate	90 mAh
Rigliă brățară	245mm*16mm *11. 5 mm	Ambalare	Brățară + Instrucțiuni

CHESTIUNI CARE NECESITĂ ATENȚIE

Vă rugăm să evitați impactul puternic, căldura extremă și expunerea brățării la aceste fenomene!

Vă rugăm să nu dezasamblați, reparați sau transformați dispozitivul pe cont propriu.

Utilizarea mediului este 0 grade ~45 grade și este interzisă aruncarea dispozitivului în foc pentru a nu provoca o explozie.

Vă rugăm să ștergeți apa de pe brățară folosind o cârpă moale, în caz contrar se poate produce coroziunea punctului de contact de încărcare, sau defectarea acestuia.

Nu atingeți substanțele chimice precum benzina, nu curățați folosind propanol, alcool, nici nu aduceți dispozitivul în contact cu insecticide.

Vă rugăm să nu utilizați acest produs în condiții de presiune ridicată și mediu magnetic ridicat.

Dacă aveți pielea sensibilă sau strângeți brățara este posibil să simțiți disconfort.

Vă rugăm să ștergeți la timp picăturile de transpirație de pe încheietura mâinii. Cureaua poate intra în contact prelungit cu săpunul, transpirația, alergiile sau ingredientele poluante care pot provoca prurit.

Dacă este folosită des, se recomandă curățarea brățării săptămânal. Ștergeți cu o cârpă umedă și îndepărtați uleiul sau praful cu săpun delicat.

Nu este indicat să purtați brățara la mână atunci când faceți o baie fierbinte.

După înot, vă rugăm să ștergeți brățara rapid pentru a rămâne uscată.